

Varilite Evolution PSV™

Trykkavlastende sittepute

Varilite Evolution PSV™ er et godt valg til brukere som trenger en optimal trykkavlastende pute. Brukerne har samtidig behov for enkel tilpasning, lav vekt, stabil sitte- og forflytningsflate, god hjelp til symmetrisk sittestilling og minimalt med vedlikehold.

Lav vekt, enkel betjening, optimal trykkavlastning og god stabilitet kjennetegner Varilite Evolution PSV™.


- Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet
- 10 cm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate
- Skummet i puten gir god sittestabilitet
- Stabil front gir fast underlag ved forflytning
- Ulike skumtyper i puten fremmer symmetrisk sittestilling
- Kombinasjonen luft/skum gir meget gode isolerende egenskaper
- God ventilasjon sikres ved at trekket har åpne celler
- Enkel og trygg innstilling av puten med den patenterte Varilite PSV™ ventilen

Enkel og trygg tilpasning med Varilite PSV™ ventil

Varilite PSV™ ventil gjør tilpasningen enkel og sikker.

Ventilen stiller inn trykket i puten automatisk. Du er trygg på at puten er innstilt som før når du vedlikeholder den.

Varilite Evolution PSV™ har valg for ventil på høyre eller venstre side som standard.

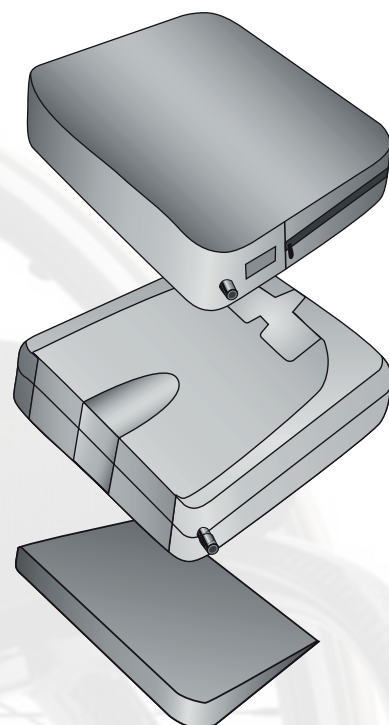

panthera norge

Røykenveien 142A • 1386 Asker • panthera.no • Tlf: 90 24 55 55



VARILITE

Art.nr	Størrelse	NAV hj.m.nr
72415	30 x 35 cm	078913
74415	35 x 35 cm	078914
74615	35 x 40 cm	078893
74816	35 x 45 cm	146164
74016	35 x 50 cm	146165
75515	38 x 38 cm	146166
75715	38 x 43 cm	146167
76415	40 x 35 cm	146168

Art.nr	Størrelse	NAV hj.m.nr
76615	40 x 40 cm	078894
76815	40 x 45 cm	078895
76015	40 x 50 cm	078896
77715	43 x 43 cm	078897
78615	45 x 40 cm	078898
78815	45 x 45 cm	078899
78015	45 x 50 cm	078900
70615	50 x 40 cm	078901

Art.nr	Størrelse	NAV hj.m.nr
70815	50 x 45 cm	070815
70015	50 x 50 cm	078903
72815	55 x 45 cm	078904
72015	55 x 50 cm	078905
74815	60 x 45 cm	078906
74015	60 x 50 cm	078907

Tilbehør til Varilite Evolution PSV

Baser, Wave-serien, for ytterligere posisjonering:

Alle basene monteres under puten, inne i trekket. Basene kan enkelt modifiseres med kniv.

*NB husk å bestille passende trekk (se prisliste)

CPW

(Contoured positioning Wedge)



Cover*

Wave
CPW

Air-Foam
Floatation
Cushion

LPB

(Lateral Positioning Base)



Cover*

Wave
LPB

Air-Foam
Floatation
Cushion

CPB

(Contoured Positioning Base)



Cover*

Wave
CPB

Air-Foam
Floatation
Cushion

Passer i standard trekket som følger med puten.

Gir bedret støtte for lårene og gjør puten litt fastere og høyere i forkant.

Med basene LPB og CPB er det behov for et litt større trekk enn standard. Se prisliste. Disse gir et mer stabilt underlag for puten når den plasseres i hengekøyeseter og gir ekstra støtte på bekkenet og lårene.

CPB har i tillegg opphøyning på midten i fremkant, abduksjon.

Plansete Finér



Plansete plasseres i trekket under puten når det er behov for å eliminere hengekøyesete.

Kile Vannfast skum



Kile kan monteres under puten ved behov for brattere setevinkel eller mer lårstøtte.

Skumplater 25 x 25 x 0,5 cm



Selvklebende skumplater som ofte brukes i forbindelse med oppbygging og kompensering for asymmetri på putene. Kan også brukes som polstring på insiden av klesbeskyttere og på fotplater.

panthera norge

Røykenveien 142A • 1386 Asker • panthera.no • Tlf: 90 24 55 55

VARILITE