


# Inserto Domino

## Trykkavlastende sittepute

Domino har svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Den er meget anatomisk formet og vil kunne tilpasses nesten enhver kroppsfasong til det perfekte. Domino passer særdeles bra for brukere som har redusert sittestabilitet og der man i tillegg har ønske om å forebygge, korrigere eller kompensere for skjevheter eller rotasjoner i bekkenet, samt andre asymmetrier i bena. Domino er bygget opp av moduler som individuelt kan stilles inn slik at brukerens bekken og øvrige sitteflate blir omsluttet. Modulene stilles inn slik at fasongen på puten korresponderer med formen på brukerens kropp. I tillegg har puten et skuminnlegg av viskoelastisk materiale som tar opp små ulikheter i form mellom kropp og pute slik at trykket blir jevnt fordelt. Inserto Domino kommer i 13 ulike størrelser og vil passe i rullestoler fra setebredde 25-50 cm. Dermed finnes også Inserto Domino til de aller minste brukerne. Puten leveres med to trekk, og veier kun fra 0,7 kg.

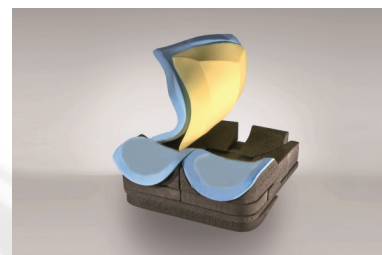

### HVEM KAN BRUKE DOMINO


- De som har høy risiko for trykksår.
- De som har behov for stabilitet/forbedret balanse.
- De som har bekkenskjevhet.
- De som har rotert bekken, med/uten asymmetrisk benstilling (wind-swept)
- Bakovertiltet bekken, med/uten abduert hoft.
- De som har benlengdeforskjell (luksert hoft, rotert bekken)
- Kan tilpasses barn fra sb 23 til voksne med opptil sb 52

### TEKNISKE EGENSKAPER

- Puten er bygget opp med flat base og 17 strukturelle moduler, som er laget av ettergivende men fast polyetylskum.
- Ett sett med polstring/skum som består av forskjellige lag. Det er designet to typer skum som til sammen gir optimal trykkavlastende funksjon og svært god komfort. Samtidig gir skummet brukeren meget god stabilitet og vibrasjonsdemping.
- Putetrekket består av et luft-trekk som har inkontinensmembran på innsiden og er antibakterielt behandlet.



JUSTERBAR TRYKKFORDELING

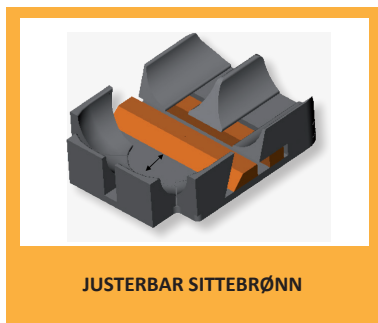

JUSTERBAR SITTEBRØNN




JUSTERBAR ADDUKSJONSSTØTTE



JUSTERBAR ABDUKSJONSSTØTTE



ROTERING AV BEKKEN  
MED ASYMETRISK BENSTILLING

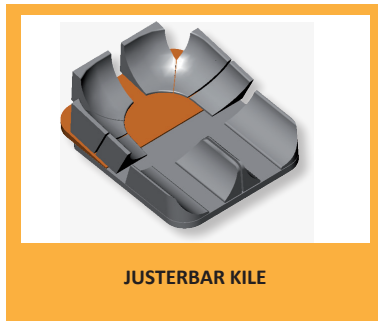

JUSTERBAR KILE



JUSTERING AV BEKKENSKEJVHET



JUSTERING AV BEKKENROTASJON



STØTTE FOR BAKOVER-  
OG FREMVERROTERT BEKKEN



JUSTERING FOR BENLENGDEFORSKJELL



JUSTERING FOR BENLENGDEFORSKJELL



BEKKENROTASJON MED  
BENLENGDEFORSKJELL

Art.nr.	Varetekst	NAV Hj.m.nr.
PMD3D-2530	Pute sete Inserto Domino b25 d30 ventilert inkotrekk	248583
PMD3D-3030	Pute sete Inserto Domino b30 d30 ventilert inkotrekk	248584
PMD3D-3038	Pute sete Inserto Domino b30 d38 ventilert inkotrekk	243977
PMD3D-3638	Pute sete Inserto Domino b36 d38 ventilert inkotrekk	252547
PMD3D-3642	Pute sete Inserto Domino b36 d42 ventilert inkotrekk	248585
PMD3D-4040	Pute sete Inserto Domino b40 d40 ventilert inkotrekk	244220
PMD3D-4045	Pute sete Inserto Domino b40 d45 ventilert inkotrekk	243484
PMD3D-4245	Pute sete Inserto Domino b42 d45 ventilert inkotrekk	243482
PMD3D-4250	Pute sete Inserto Domino b42 d50 ventilert inkotrekk	248587
PMD3D-4545	Pute sete Inserto Domino b45 d45 ventilert inkotrekk	244752
PMD3D-4550	Pute sete Inserto Domino b45 d50 ventilert inkotrekk	243853
PMD3D-4845	Pute sete Inserto Domino b48 d45 ventilert inkotrekk	248587
PMD3D-4850	Pute sete Inserto Domino b48 d50 ventilert inkotrekk	248588